



# Insektenstich? Juckt uns nicht.

Bei Juckreiz, Schwellungen und Schmerzen, verursacht durch Insektenstiche und -bisse, bietet bite away® schnelle Hilfe.

Chemiefrei – wirkt nur mit konzentrierter Wärme im Bereich um 51°C.





## Wirkweise von bite away®

Mittels lokaler Wärmeeinwirkung können durch Insektenstiche und -bisse hervorgerufene Schwellungen und Juckreiz wie z.B. von Mücken, Wespen, Bienen, Hornissen oder Bremsen verhindert werden. Positive Erfahrungen wurden auch nach Kontakt mit Brennnesseln, Quallen und Petermännchen gemacht.

Es wird vermutet, dass das rein physikalische Verfahren verschiedene Signalwege aktiviert und somit Immun- und Entzündungsreaktionen positiv beeinflusst. Eine Regulierung der Ausschüttung von Histamin und Abbauenzymen kann Entzündungsreaktionen dämpfen und Insektengifte inaktivieren.

Bei einem Insektenstich kann, selbst bei späterer Anwendung, der Juckreiz schnell und effektiv gestoppt werden. Appliziert wird die kurze, konzentrierte Wärme im Bereich um 51°C (wahlweise 3 Sekunden für Kinder\*/ 6 Sekunden für Erwachsene) durch das stiftgroße, zertifizierte Medizinprodukt. bite away® wirkt völlig chemiefrei und eignet sich daher besonders für Schwangere, Allergiker und Kinder.\*


Erhältlich in Ihrer  
Apotheke oder auf  
[stichheiler.de](http://stichheiler.de)

- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Chemiefrei
- ✓ Patentierte Technologie



# Einfache Anwendung

bite away® wird mit der keramischen Kontaktfläche auf dem Einstich oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten (3 Sekunden für Kinder\* / 6 Sekunden für Erwachsene) wird eine Temperatur im Bereich um 51°C erreicht und für die gewählte Zeit gehalten.

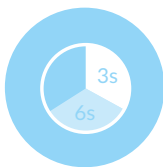

Sind die Begleitsymptome noch nicht gänzlich verschwunden, sollte die Anwendung wiederholt werden, bis keinerlei Symptomatik mehr spürbar ist. Eine Pause von 10 Sekunden ist vor erneuter Behandlung einzuhalten.



\* Eigenanwendung ab 12 Jahren



Im Einsatz bei:

**DLRG**



Besuchen  
Sie uns auf

**facebook**

facebook.com/  
biteaway

RIEMSER Pharma GmbH

An der Wiek 7  
17493 Greifswald – Insel Riems  
Telefon: +49 30 338427-0  
E-Mail: [info@riemser.com](mailto:info@riemser.com)

[riemser.com](http://riemser.com)